


LOVE[®]
COSMEDICAL

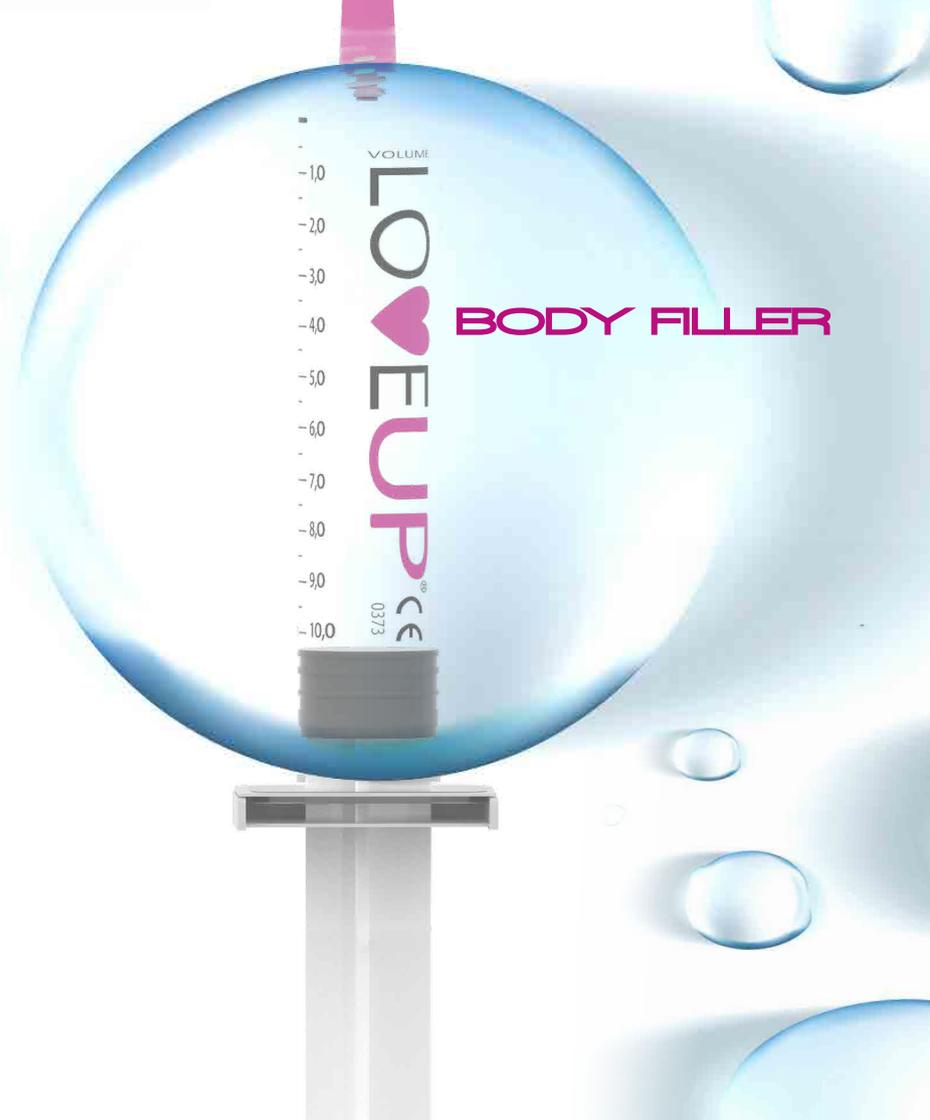

BODY FILLER

VOLUME

LOVE UP[®] CE

0373



VOLUME LOVEUP®

1. Che cosa è LOVEUP?

Il filler LOVEUP è un gel viscoelastico sterile, apirogeno, latex free e biodegradabile a base di acido ialuronico, concepito specificatamente per il ripristino di grandi volumi. È un acido ialuronico di sintesi non animale (NASHA). Ha una durata media di circa 9-12 mesi.

2. Come funziona LOVEUP?

Una volta iniettato, LOVEUP, espande i tessuti molli sottocutanei, donando turgore e volume, il graduale processo di riassorbimento ridurrà il risultato estetico, progressivamente.

Il risultato è immediato e stabile per mesi, grazie alla forte stabilità dell'acido ialuronico dovuta all'alto livello di purificazione e di cross-linkaggio.

3. Dove può essere utilizzato?

LOVEUP può essere iniettato in qualsiasi area corporea che necessiti di essere riempita con grandi volumi.

4. Come deve essere utilizzato?

Il trattamento è sicuro, efficace, facile e veloce da eseguire. LOVEUP è un filler che deve essere rilasciato sui tessuti molli sottocutanei profondi. Le tecniche variano a seconda delle diverse zone (iniezione in bolo, rilascio retrogrado, a ventaglio).

5. Quali sono i vantaggi principali?

- Sicurezza
- Tempi di recupero minimi, senza limitazioni funzionali
- Risultato stabile e duraturo
- Facile e veloce da eseguire
- Effetto naturale, prevedibile, modulabile e reversibile

**RIMODELLA E ARMONIZZA LA SILHOUETTE
SENZA CHIRURGIA**

**AUMENTA GRANDI AREE CORPOREE
DELICATAMENTE**





VOLUME **LOVEUP**[®]

1. What is LOVEUP?

LOVEUP is a sterile, apyrogenic, latex free, viscoelastic and biodegradable hyaluronic acid gel filler, specifically designed for large volume restoration. LOVEUP is a non-animal synthesis hyaluronic acid (NASHA). It has 9-12 months longevity.

2. How does LOVEUP works?

One injected LOVEUP will expand soft tissue giving a volume effect. Results will be immediate and stable for a number of month thanks to its strong stability of HA, high level of purification and cross-linkage of HA, until reabsorption will erase the aesthetic outcome.

3. Where can it be used?

It can be injected into any body area that needs to be filled with large volume.

4. How must it be used?

Treatment is safe, easy and fast. LOVEUP is a filler that must be released on deep subcutaneous soft tissues of the body and face. Techniques change on different areas (bolus, retrograde release, fan technique).

5. What are the main advantages?

- *Safe*
- *Minimal recovery time*
- *Long lasting effect*
- *Easy and fast to perform*
- *Natural effect, modifiable*

**REMOULD AND HARMONISE SILHOUETTE
WITHOUT SURGERY**

SOFT EXPANSION OF LARGE BODY AREAS



CARATTERISTICHE / TECHNICAL DATA



DIFFERENZA / DIFFERENCE

Livello di cross linkaggio Cross linking ration	10%	Durata Duration	6-12 mesi 6-12 months
Concentrazione di HA HA concentration	20 mg/mL	HA peso molecolare HA molecular weight	1.8 MDa
Agente cross-linkante Cross linking agent	BDDE	Viscosità Viscosity	1,8 m ³ /kg
BDDE residuo BDDE residual	<2ppm	PH	7,0 (+/- 0,5)
Livello di endotossine batteriche Bacterial endotoxin level	<0.250 EU/mL	G' (1,5 Hz)	286 Pa

Grande stabilità del gel dovuta all'alto livello di cross-linkaggio e al grado di purificazione dell'acido ialuronico

Strong stability of HA due to high level of purification and cross-linkage

VOLUME **LO♥EUP**[®]

MAIN TARGETS

Glutei, Polpacci, Spalle, Petto maschile,
Mani, Irregolarità corporee, Tricipiti,
Genitali esterni


*Buttock, Calf, Shoulders, Male chest,
Hands, dimplings, Triceps,
Intimal areas*




*NON iniettare nella ghiandola mammaria
DO NOT inject on female breast*




Aumento laterale dei glutei
Lateral enhancement of the buttock

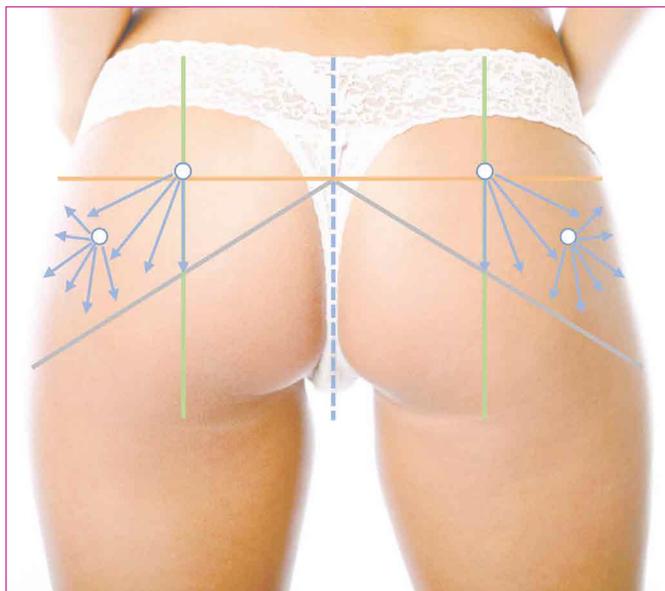



Proiezione posteriore dell'aumento
Posterior projection enhancement

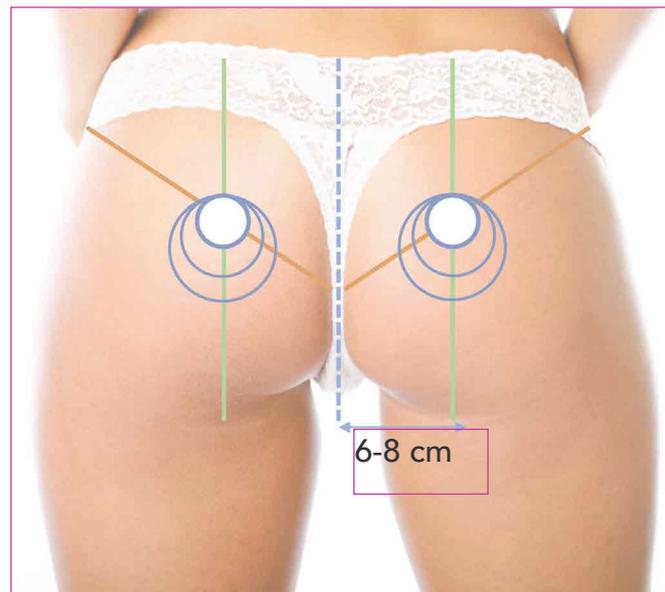



Il tessuto sottocutaneo viene espanso nel modo migliore garantendo un'ottimale profilo di sicurezza
Subcutaneous soft tissue is expanded in the best way and respects the safety of the patient

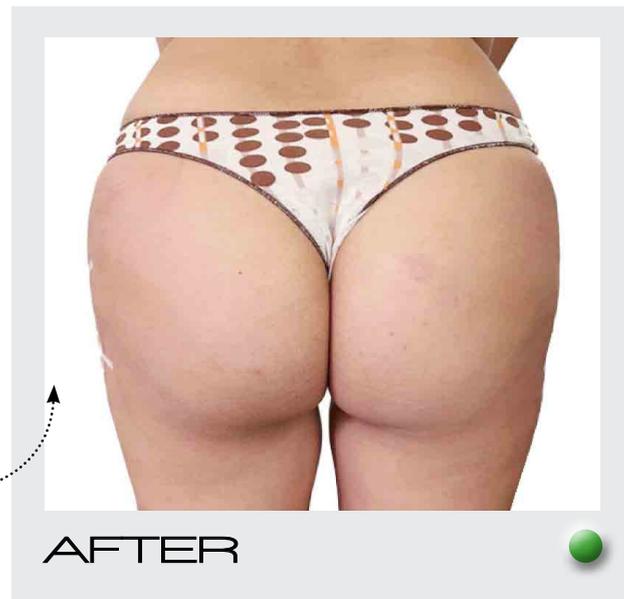

Courtesy of Dr. Cinzia Forestiero

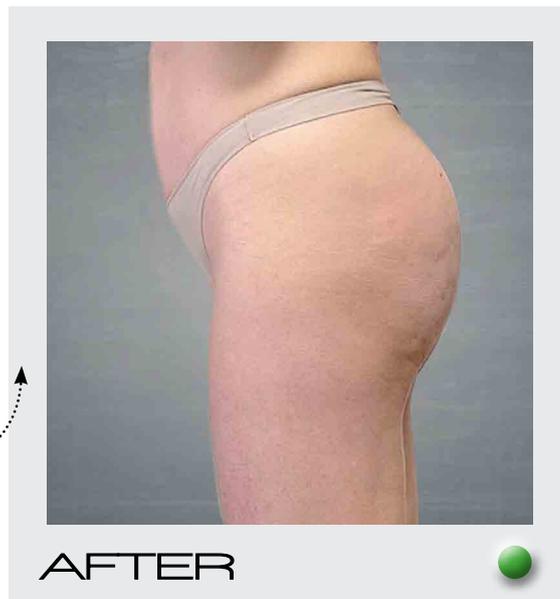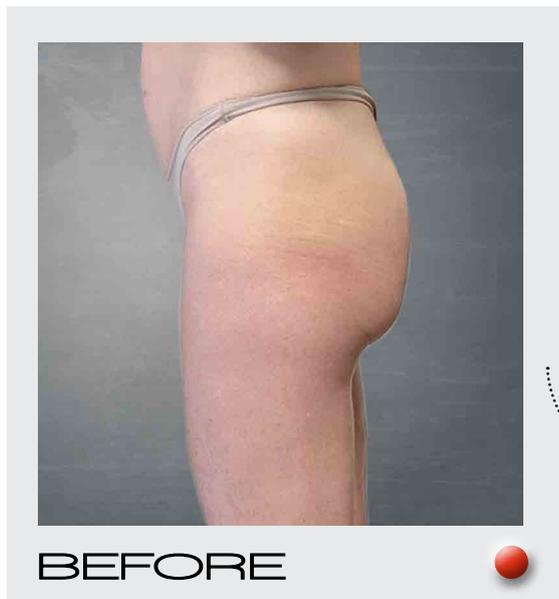

Courtesy of Dr. Luana Leggieri

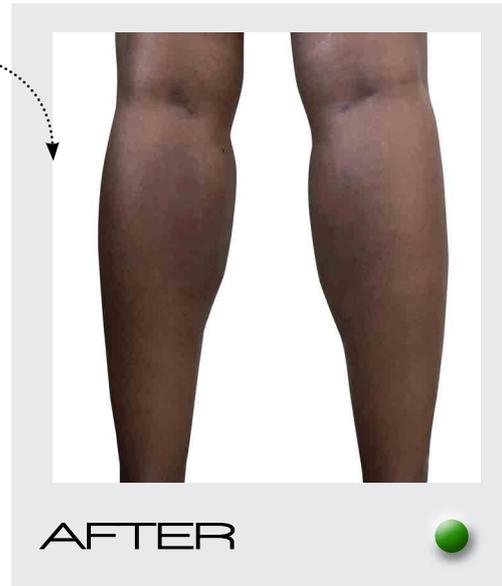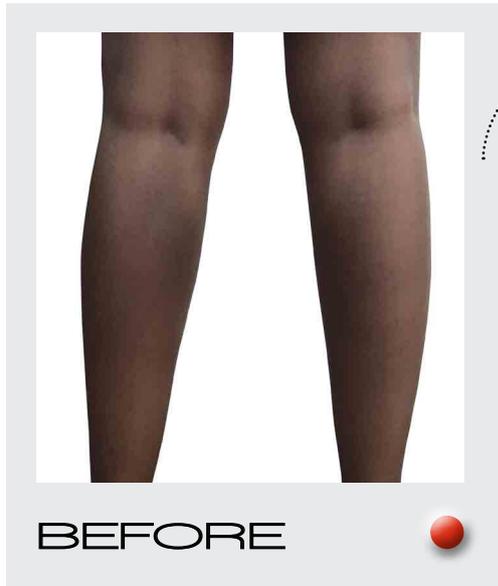

Courtesy of Dr. Roberto Amore



www.lovecosmedical.com



LOVE[®]
COSMEDICAL

MADE IN ITALY

LOVE COSMEDICAL S.r.l.

Sede legale: Via Toniolo 9 - 57022 Castagneto Carducci - LI
Sede operativa: Via per Rosignano 49 - 57016 Rosignano Solvay - LI
+39 0586 016149 - info@lovecosmedical.com